

*Informació per a usuaris
i familiars*

Bomba infusora de perfusió contínua CADD-Legacy Plus



Marxeu a casa amb un dispositiu anomenat bomba infusora de perfusió contínua. Aquest aparell serveix per administrar part del vostre tractament de quimioteràpia de forma continuada.

La durada de la perfusió pot variar en funció del tipus de tractament que estigueu realitzant.

No heu de tenir cap problema amb el funcionament de la bomba de perfusió si seguiu les instruccions que us ha donat l'equip d'infermeria de l'Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia.


Recomanacions i precaucions

- Quan porteu l'aparell no el podeu parar ni desconnectar del catèter.
- Les tecles de la bomba estan bloquejades per a evitar possibles complicacions com la compressió accidental d'una tecla.
- No exposeu la bomba a temperatures extremes (inferiors a +2 °C o superiors a 40 °C).
- No netegeu la bomba amb acetona o altres netejadors abrasius.
- Tingueu cura de l'equip de perfusió i reviseu-lo periòdicament, buscant i evitant pinçaments i doblecs.
- En cas de caiguda o cop de la bomba, inspeccioneu per veure si ha sofert algun desperfecte i comenteu-ho amb la infermera.

Funcionament

La infermera posarà en marxa la bomba al ritme adequat per administrar la medicació.

Veureu que quan passin les hores els ml disminuiran. El dia de la retirada de la bomba, quan el volum arribi als **5 ml**, l'aparell emetrà una alarma, deixaran de sortir els ml i a la pantalla apareixerà el missatge "**Bajo**". A partir d'aquest moment disposareu de 90 minuts per acudir a l'hospital a treure la bomba.


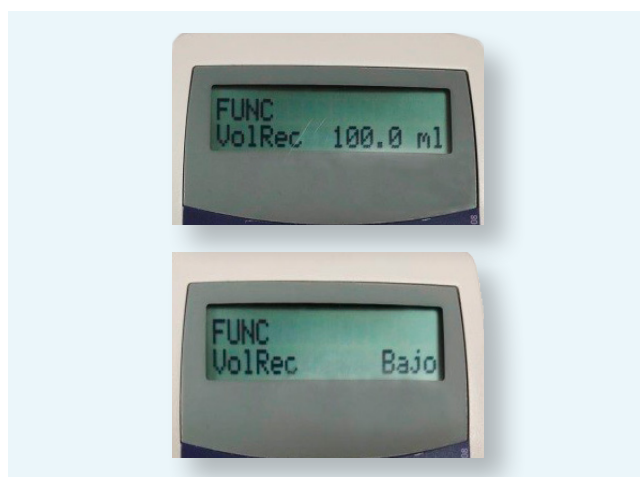


Mentre porteu la bomba pot passar que es dispari alguna alarma del sistema. Si és així, observeu la pantalla i podreu resoldre el problema seguint les instruccions que estan descrites a continuació.

Les piles tenen poca càrrega o s'han esgotat


Haureu de canviar les piles seguint les indicacions que us facilitem a continuació:

1. Retireu la tapa de les piles.
2. Traieu les piles i substituïu-les per les noves tipus AA.
Quan les poseu sentireu un "bip" que confirmarà que les heu posat bé.
3. Torneu a posar la tapa. La bomba revisarà les dades i al final emetrà uns "bips".
4. Si en aquest punt salta l'alarma i visualitzeu **"Aviso rev. Ver manual"** a la pantalla, pressioneu un cop la tecla **"Parada/inicio"** i la bomba seguirà fent la revisió.
5. Pressioneu novament la tecla **Parada/inici** i manteniu-la pressionada fins que s'esborrin els tres grups de ratlles per iniciar novament la perfusió (abans de començar tornarà a fer una comprovació dels paràmetres).
6. La bomba ja està en funcionament de nou. Continua en el mateix punt on s'ha parat.

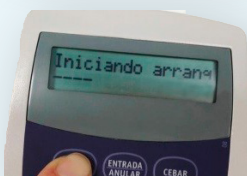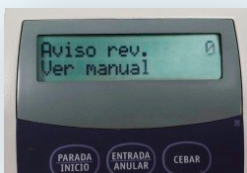

Oclusió línia/pressió elevada

Indica que el líquid no està sortint des de la bomba cap al catèter. Segurament és perquè s'ha pinçat la línia en algun lloc. Reviseu la línia buscant algun pinçament en el circuit. Elimineu la causa de l'oclusió. La bomba es parará i l'haureu d'engegar com s'explica en el punt núm. 5 de l'apartat anterior. En cas de persistir l'alarma pressioneu la tecla **"parada/inicio"** per aturar-la.

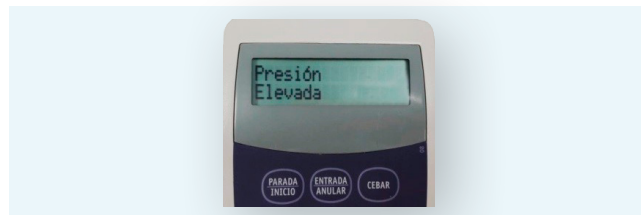

Contacte

Per a qualsevol dubte o informació podeu contactar amb la infermera de l'hospital de dia.

Telèfon: 93 875 93 00 - extensió 5500 i 5501

Horari:

- Dilluns a dijous: de 07.30 a 18.30 h
- Divendres: de 07.30 a 15.30 h

Per a més informació podeu descarregar-vos al mòbil l'app d'Althaia

