

*Informació per a usuaris
i familiars*

Bomba infusora de perfusió intermitent CADD-Legacy Plus



Marxeu a casa amb un dispositiu anomenat bomba infusora de perfusió intermitent. Aquest aparell serveix per administrar-vos el tractament durant tot el dia i amb la freqüència pautaada pel vostre metge.

El personal de la Unitat d'Hospitalització a Domicili **acudirà diàriament a casa vostra** per fer el canvi de la bossa del tractament que hi haurà connectada a la bomba intermitent.

No heu de tenir cap problema amb el funcionament del dispositiu si **seguiu les instruccions** que us hem facilitat.

Tot i això, si sona alguna alarma del sistema, observeu la pantalla i podreu resoldre el problema seguint les indicacions que us facilitem en aquest full a l'apartat "**instruccions en cas d'alarma**".

Funcionament

- La infermera posarà en marxa la bomba al ritme i freqüència adequada per a administrar la medicació.
- Quan passin les hores **disminuiran els ml i l'endemà estarà gairebé a 0** fins que us fem la visita a domicili per tornar-la a programar.
- L'estona que la bomba no administra el tractament proporciona una quantitat de sèrum de manteniment.

Recomanacions i precaucions

- Per a la vostra seguretat, **les tecles de la bomba estan bloquejades**. Així evitem possibles complicacions en cas de pressió accidental d'una tecla.
- **No exposeu la bomba a temperatures extremes** (inferior a + 2 graus i superiors als 40 graus).
- No netegeu la bomba amb acetona o altres **netejadors abrasius**.
- Tingueu cura de l'equip de perfusió i **reviseu-lo** periòdicament, buscant i evitant pinçaments i dobles.
- En cas de caiguda o cop accidental de la bomba, inspeccioneu-la per veure si ha sofert algun desperfecte i comenteu-ho amb el personal de la unitat.

Instruccions en cas d'alarma

1 OCLUSIÓ DE LÍNIA / PRESSIÓ ELEVADA

Oclusió de línia


Indica que el líquid no està sortint des del recipient del sèrum cap a la bomba. Segurament s'ha pinçat la línia en algun lloc.

Reviseu la línia buscant algun pinçament i elimineu-lo. La bomba tornarà a funcionar.

Pressió elevada

Indica que el líquid no està sortint des de la bomba cap al catèter. Segurament s'ha pinçat la línia en algun lloc.

Estireu el braç. Habitualment el pinçament es produeix per tenir el braç recolzat sobre la línia. Si l'alarma no cedeix, reviseu de nou la línia buscant algun pinçament i elimineu-lo. Si persisteix l'alarma, **pressioneu la tecla (1) durant 4 segons** per aturar-la.

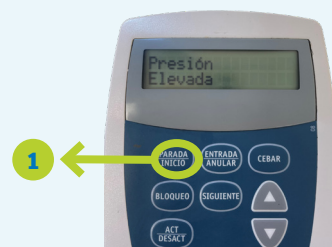

2 VOLUM RECIPIENT BUIT

Indica que el volum de la bossa de sèrum s'ha acabat.

Pressioneu la tecla (1) durant 4 segons. Si és al final del tractament, per tal d'aturar definitivament la bomba, **pressioneu la tecla (2) durant 4 segons.**



3 LES PILES AA TENEN POCA CÀRREGA O S'HAN ESGOTAT (PILA BAJA)

Apareixerà el missatge "Pila baixa" i haureu de seguir les indicacions que us facilitem a continuació per canviar-la.


1. Atureu la bomba pressionant la tecla (1) durant 4 segons fins que surtin tres grups de ratlles




2. Retireu la tapa de les piles




3. Retireu les piles i substituiu-les per les noves. Les marques + i - han de coincidir amb les del compartiment. Un cop canviades sentireu un "bip"

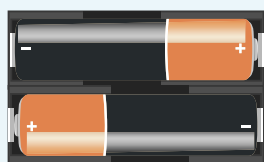

4. Torneu a posar la tapa. La bomba s'iniciarà automàticament. Farà una revisió de les dades i emetrà 6 "bips" al final

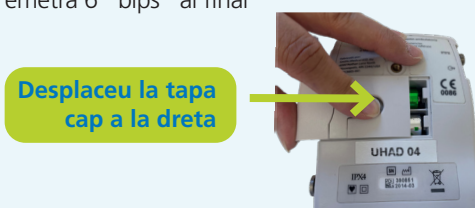

5. Pressioneu novament la tecla (1) durant 4 segons i manteniu-la pressionada fins que s'esborrin els tres grups de ratlles per tal d'iniciar novament la perfusió. Abans de començar tornarà a fer una comprovació dels paràmetres

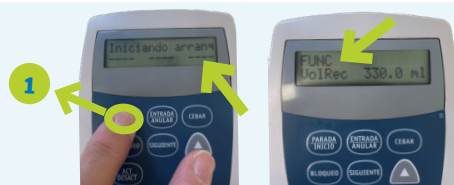

Contacte

Per a qualsevol dubte o informació podeu contactar el personal d'infermeria de la Unitat d'Hospitalització a Domicili.

Telèfon: 626 665 021. **Horari:** dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h i dissabtes i festius de 09:00 a 17:00 h. Fora d'aquest horari, si sorgeix alguna incidència, truqueu al telèfon 687 720 878